

Иммуногематологическая продукция

Иммуногематологическая система ORTHO AutoVue® Innova

Полностью автоматический иммуногематологический анализатор постоянного доступа для выполнения повседневной работы в области групповой серологии крови. Система позволяет одновременное проведение типирования группы крови прямым и обратным методом, определение резус-фактора, фенотипирования, скрининг антител и их идентификацию, а также пробы на индивидуальную совместимость крови (пациент-донор). Технология колоночной агглютинации со стеклянными шариками, реализованная в кассетах BioVue®, обеспечивает непревзойденную точность и надежность результатов. Анализатор предназначен для работы в иммуногематологических лабораториях больниц и центров переливания крови.



Код для заказа	Наименование
6901956	Система Ortho AutoVue Innova

Основные характеристики

Производительность:	до 47 образцов в час в зависимости от профиля тестирования
Доступ к прибору:	полностью произвольный доступ; загрузка на борт образцов и реагентов без остановки процесса анализа, приоритетная обработка срочных образцов.
Количество реактивов на борту:	до 240 кассет, автоматическое определение и выбор необходимой кассеты, пополнение без остановки процесса

Инвентаризация и обработка реагентов	автоматическая инвентаризация, детектор уровня жидкости обеспечивает заблаговременное предупреждение о нехватке реагентов; ротор реагентов для автоматического взбалтывания, возможность хранения реагентов без взбалтывания
Широкое меню тестов:	- определение группы крови и резус-фактора - обратная реакция определения группы крови - Rh фенотипирование - прямой и непрямой антиглобулиновый тест - перекрестная совместимость пациент/донор - скрининг антител и идентификация антител - ферментное тестирование - специальное типирование антигенов с использованием жидких антисывороточных реагентов
Количество образцов на борту:	до 42 образцов, 4 штатива для рутинных исследований, один STAT штатив на 6 образцов, возможность использования пробирок разных объемов
Проверка образцов:	обнаружение сгустков, определение уровня жидкости и недостаточного количества образца
Центрифугирование: Инкубация:	цикл центрифугирования всего 5 минут, вместимость 24 кассеты
Надежность и безопасность:	для каждого типа кассет существует собственный «прокалыватель» защитной фольги, что исключает возможность контаминации сывороточного реагента; верификация забора образцов и реагентов; многократная идентификация кассет на разных уровнях с помощью уникального штрих-кода
Считывание результата:	автоматическое считывание и интерпретация результата с двух сторон кассеты, градация и визуализация результата
Простота использования:	легкость обучения, понятный интерфейс, широкие возможности использования лабораторной информационной системы (ЛИС)
Сервис и поддержка:	технология e-Connectivity для удаленного мониторинга и диагностики работоспособности анализатора
Размеры анализатора:	длина 140 см, высота 92 см, ширина 75 см, масса 230 кг

Иммуногематологический анализатор ORTHO BioVue®

Ручная иммуногематологическая система для выполнения повседневной работы в области групповой серологии крови на основе технологии колоночной агглютинации. Ortho BioVue® предназначен для типирования группы крови со вторичным/реверсивным

контролем сыворотки, Rh-фенотипирования, скрининга и идентификации антител, а также пробы на индивидуальную совместимость крови (пациент-донор). Эта ручная система предназначена для работы в небольших иммуногематологических лабораториях, а также может использоваться в качестве дополнения к автоматической системе AutoVue для проведения редких типов анализа. Возможно расширение комплектации до полуавтоматического анализатора с помощью набора OrthoScan™.



Основные характеристики

Рабочая стойка:	размещение до 12 проб пациентов и 48 кассет
Дозатор:	5 программ раскапывания, стандартные объемы - 10, 40, 50 мкл.
Объем образца:	от 10 до 50 мкл, использование одноразовых наконечников
Инкубация:	наличие 2 отделений, вместимостью до 16 кассет каждое, 2 таймера для разных периодов инкубации
Центрифугирование:	2 фазы, полный цикл 5 минут, вместимость - 12 кассет
Комплектация OrthoScan:	- стойка-рама для сканирования кассет - компьютер - принтер для нанесения штрих-кодов

Код для заказа	Описание
953052	Центрифуга BioVue
41130	Нагревательный блок BioVue
707830	Штатив для образцов и кассет BioVue
710131 OR	Электронная пипетка BioVue с зарядным устройством (опционально)
300.0122	Набор OrthoScan™ (опционально)



(00) ABO-Rh/Reverse

Назначение: определение антигенов системы ABO и Rh (D), а также ожидаемых антител группы крови и проведение аутоконтроля

Количество тестов на кассету: 1

Состав:

Анти-А: смесь моноклональных антител анти-А мыши (IgM, клоны MHO4 и 3D3)

Анти-В: смесь моноклональных антител анти-В мыши (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19)

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное антитело (IgM, клон D7B8)

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизированное для проведения контроля

A₁, B: потенцирующее вещество без антител для определения группы крови обратным методом

Код для заказа:

707155	100 шт
707100	400 шт нет в кодах



(10) ABD Confirmation

Назначение: подтверждение групп крови систем ABO и Rh (D)

Количество тестов на кассету: 2

Состав:

Анти-А: смесь моноклональных антител анти-А мыши (IgM, клоны MHO4 и 3D3)

Анти-В: смесь моноклональных антител анти-В мыши (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19)

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное антитело (IgM, клон D7B8)

Код для заказа:

707135	100 шт
--------	--------



(40) ABDD/K

Назначение: определение антигенов системы ABO, Rh (D) (с использованием двух отдельных анти-D реагентов) и Kell, а также проведение аутоконтроля

Количество тестов на кассету: 1

Состав:

Анти-А: смесь моноклональных антител анти-А мыши (IgM, клоны MHO4 и 3D3)

Анти-В: смесь моноклональных антител анти-В мыши (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19)

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное антитело (IgM, клон D7B8)

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное антитело (IgM, клон RUM1)

Анти-К: Анти-К мышиное моноклональное антитело (клон MS56)

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизированное для проведения контроля

Код для заказа:

707270

100 шт



(11) Rh-hr

Назначение: определение антигенов системы Rh

Количество тестов на кассету: 1

Состав:

Анти-D: человеческое моноклональное антитело (IgM, клон D7B8)

Анти-C: моноклональное антитело (клон MS24)

Анти-E: моноклональное антитело (клон C2)

Анти- $\bar{C}$: моноклональное антитело (клон MS42)

Анти-e: смесь моноклональных антител (клоны MS16, MS21 и MS63)

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизированное для проведения контроля

Код для заказа:

707255

100 шт



(20) Кассета для новорожденных

Назначение: определение антигенов системы ABO и Rh (D), а также проведение прямой пробы Кумбса у новорожденных

Количество тестов на кассету: 1

Состав:

Анти-А: смесь моноклональных антител анти-А мыши (IgM, клоны МНО4 и 3D3)

Анти-В: смесь моноклональных антител анти-В мыши (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19)

Анти-А,В: смесь моноклональных антител анти-А,В мыши (IgM, клоны анти-А МНО4 и 3D3, клоны анти-В NB10.5A5 и NB1.19)

Анти-Д: Анти-Д человеческое моноклональное антитело (IgM, клон D7B8)

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизированное для проведения контроля

IgG: Кроличий Анти-IgG

Код для заказа:

6901906

100 шт



(22) ANG Polyspecific

Назначение: полиспецифичный реагент для установления факта наличия или отсутствия иммуноглобулинов и/или компонентов комплемента на эритроцитах человека. Данный реагент подходит для прямого и непрямого антиглобулинового тестирования, включая скрининг и идентификацию антител, а также для проб на перекрестную совместимость, типирования и аутоконтроля

Количество тестов на кассету: от 1 до 6

Состав:

POLY: антитела к человеческому глобулину, Анти-IgG (кроличий), Анти-C3b (мышинные моноклональные, клон F7G3), Анти-C3d (мышинные моноклональные, клон C4C7)

Код для заказа:

707350

100 шт

707300

400 шт



(33) ANG Anti-IgG

Назначение: анти-IgG подходит для прямой и непрямой пробы Кумбса, включая скрининг и идентификацию антител, тесты на индивидуальную совместимость и аутоконтроль

Количество тестов на кассету: от 1 до 6

Состав:

IgG: антитела к человеческому глобулину, Анти-IgG (кроличий)

Код для заказа:

707450	100 шт
707400	400 шт



(30) DAT/IDAT

Назначение: анти-IgG подходит для прямой и непрямой пробы Кумбса, включая скрининг и идентификацию антител, тесты на индивидуальную совместимость и аутоконтроль

Количество тестов на кассету: 2

Состав:


IgG: антитела к человеческому глобулину, Анти-IgG (кроличий)

C3b, C3d: смесь моноклональных антител мыши к человеческому глобулину Анти-C3b (клон F7G3) И Анти-C3d (клон C4C7)

Контроль: компоненты растворителя без специфических антител

Код для заказа:

707165	100 шт
--------	--------

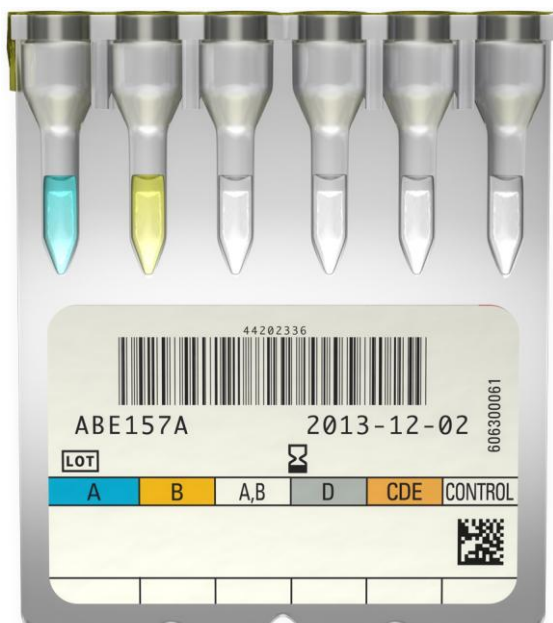

(44) ABO-Rh

Назначение: определение антигенов системы ABO, Rh (D) и выявление Rh-отрицательных эритроцитов: клеток без антигенов D, C и E. Все эритроциты, несущие D^{VI} , являются C или E положительными и будут взаимодействовать с CDE реагентом

Количество тестов на кассету: 1

Состав:

Анти-А: смесь моноклональных антител анти-А мыши (IgM, клоны MHO4 и 3D3)

Анти-В: смесь моноклональных антител анти-В мыши (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19)

Анти-А,В: смесь моноклональных антител анти-А,В мыши (IgM, клоны анти-А MHO4 и 3D3, клоны анти-В NB10.5A5 и NB1.19)

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное антитело (IgM, клон D7B8)

анти-CDE: смесь человеческих моноклональных антител Анти-CDE (IgM, клон анти-С MS24, клон анти-D MAD2, клон анти-Е C2)

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизированное для проведения контроля

Код для заказа:

707150	100 шт
707190	400 шт



(55) Poly/Neutral

Назначение: Прямая и непрямая пробы Кумбса. Качественное определение непредвиденных антител групп крови ферментными и неферментными методами

Количество тестов на кассету: 2

Состав:

POLY: антитела к человеческому глобулину, Анти-IgG (кроличий), Анти-C3b (мышинные моноклональные, клон F7G3), Анти-C3d мышинные моноклональные, клон C4C7)

NEUT: потенцирующее вещество, для тестирования прямым методом с клетками, обработанными ферментом

Код для заказа:

707355	100 шт
707310	400 шт



(66) Reverse Diluent

Назначение: определения ожидаемых антител группы крови АВО и процедур серологического исследования на прямую агглютинацию


Количество тестов на кассету: от 1 до 6

Состав:

Reverse: потенцирующее вещество, оптимизированное для определения группы крови обратным методом

Код для заказа:

707550	100 шт
707580	400 шт

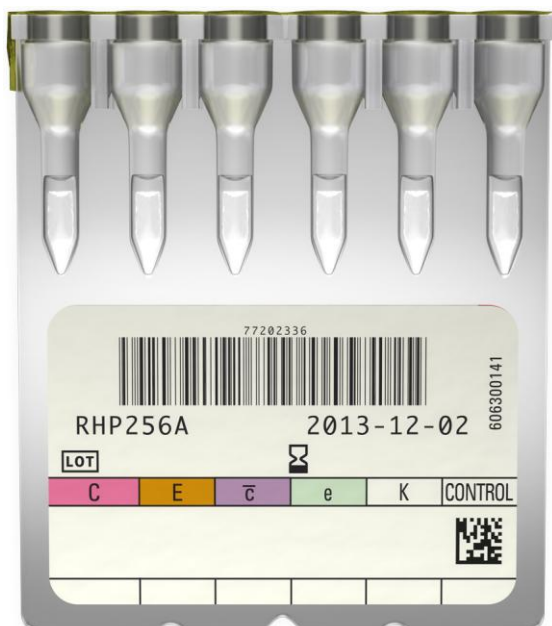

(77) Rh/K (фенотипирование)

Назначение: определение антигенов системы Rh и Kell эритроцитов человека и аутоконтроля

Количество тестов на кассету: 1

Состав:

Анти-С: моноклональное антитело (клон MS24)

Анти-Е: моноклональное антитело (клон C2)

Анти- $\bar{C}$: моноклональное антитело (клон MS42)

Анти-е: смесь моноклональных антител (клоны MS16, MS21 и MS63)

Анти-К: моноклональное антитело Анти-K1 (клон MS56)

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизированное для проведения контроля

Код для заказа:

707250	100 шт
707280	400 шт



(88) Neutral

Назначение: определение прямой агглютинации с использованием обработанных ферментами эритроцитов и образцов, содержащих антитела к антигенам, усиленной обработкой ферментами

Количество тестов на кассету: 1

Состав:

Neutral: Потенцирующее вещество, оптимизированное для исследований с обработанными ферментами клетками

Код для заказа:

707650	100 шт
707680	400 шт



(90) Kell

Назначение: определение антигена К (K1) в клетках крови донора

Количество тестов на кассету: 6

Состав:

Анти-К: анти-K1 (IgM человека) моноклональное антитело (клон MS56)

Код для заказа:

707117	100 шт
--------	--------



(48) ABO-DD

Назначение: определение антигенов системы ABO, Rh (D) (с использованием двух отдельных анти-D реагентов), а также проведение аутоконтроля

Количество тестов на кассету: 1

Состав:

Анти-А: смесь моноклональных антител анти-А мыши (IgM, клоны МНО4 и 3D3)

Анти-В: смесь моноклональных антител анти-В мыши (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19)

Анти-А,В: смесь моноклональных антител анти-А,В мыши (IgM, клоны анти-А МНО4 и 3D3, клоны анти-В NB10.5A5 и NB1.19)

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное антитело (IgM, клон D7B8)

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное антитело (IgM, клон RUM1)

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизированное для проведения контроля

Код для заказа:

707119

100 шт

Эритроциты



ORTHO® A₂ Cells

Клетки ORTHO A₂ для определения ожидаемых антител анти-А в образцах пациентов и доноров и определения антител анти-А₁ у лиц с группой крови А или А,В.

Состав:

Реагент содержит 3%-ную суспензию эритроцитов группы А₂, Rh-отрицательных (D-, C-, E-) в фосфатно-цитратном буферном разбавителе с добавками для поддержания реакционной способности, замедления гемолиза и предотвращения бактериальной контаминации.

Код для заказа:

6901862

ORTHO A₂ Cells

1 x 10 мл



0,8% Affirmagen®

Стандартные эритроциты для определения группы крови перекрестной реакцией.

Состав:

Конфигурации реагента 0,8% Affirmagen® включают наборы из двух, трех или четырех различных флаконов. В каждом флаконе содержится 10 мл 0,8% суспензии Rh-отрицательных (D-, C-, E-) эритроцитов в растворителе низкой ионной силы с добавками для поддержания реакционной способности, торможения гемолиза и предотвращения бактериальной контаминации.



Код для заказа:

719202

0,8% Affirmagen (A₁, B)

2 x 10 мл

719212

0,8% Affirmagen 3 (A₁, A₂, B)

3 x 10 мл

719221

0,8% Affirmagen 4 (A₁, A₂, B, O)

4 x 10 мл



3% Affirmagen®

Стандартные эритроциты для определения группы крови перекрестной реакцией.

Состав:

- Набор из двух флаконов Affirmagen содержит по одному флакону эритроцитов A₁ и B.
- Набор из четырех флаконов Affirmagen 4 содержит по одному флакону эритроцитов A₁, A₂, B и эритроцитов группы O.

Конфигурации реагента 3% Affirmagen® включают наборы объемом по 3 или 10 мл. В каждом флаконе содержится 3% суспензия Rh-отрицательных (D-, C-, E-) эритроцитов в растворителе низкой ионной силы с добавками для поддержания реакционной способности, торможения гемолиза и предотвращения бактериальной контаминации.

Код для заказа:

6901861	3% Affirmagen (A ₁ , B)	2 x 10 мл
719220	3% Affirmagen 4 (A ₁ , A ₂ , B, O)	4 x 10 мл
707930	3% Affirmagen (A ₁ , B)	2 x 3 мл
707910	3% Affirmagen 4 (A ₁ , A ₂ , B, O)	4 x 10 мл



Selectogen®

Стандартные эритроциты для скрининга непредвиденных антител групп крови.

Состав:

- 2-х клеточный набор в виде 3% или 0,8% суспензий эритроцитов группы O, содержащих наиболее клинически значимые, а также редкие антигены.
- Эритроциты индивидуального донора с фенотипом R₁R₁ или R₁^wR₁ (Selectogen I) и R₂R₂ (Selectogen II).
- Обязательное наличие следующих антигенов: D, C, E, c, e, K, k, Fy^a, Fy^b, Jk^a, Jk^b, Le^a, Le^b, S, s, M, N, P₁.
- Только один флакон набора содержит Kell-положительные эритроциты. Все клетки Vw-, Wr^a- и HLA-отрицательные. Гомозиготная экспрессия Fy^a и Jk^a.

Код для заказа:

6901863	3% Selectogen (I, II)	2 x 10 мл
707940	3% Selectogen (I, II)	2 x 3 мл
719602	0,8% Selectogen (I, II)	2 x 10 мл

Surgiscreen®

Стандартные эритроциты для скрининга непредвиденных антител групп крови.

Состав:

- Расширенный 3-х клеточный набор в виде 3% или 0,8% суспензий эритроцитов группы O, содержащих наиболее клинически значимые, а также редкие антигены.
- Каждый флакон содержит эритроциты индивидуального донора с фенотипом R₁R₁ или R₁^wR₁ (Surgiscreen I), R₂R₂ (Surgiscreen II) и rr (Surgiscreen III).
- Обязательное наличие следующих антигенов: D, C, E, c, e, K, k, Fy^a, Fy^b, Jk^a, Jk^b, Le^a, Le^b, S, s, M, N, P₁.
- Все клетки Vw-, Wr^a- и HLA-отрицательные. Гомозиготная экспрессия Fy^a, Fy^b, Jk^a, Jk^b, S и M.

Код для заказа:

6901864	3% Surgiscreen (I, II, III)	3 x 10 мл
707950	3% Surgiscreen (I, II, III)	3 x 3 мл
719102	0,8% Surgiscreen (I, II, III)	3 x 10 мл

BioVue® Screen

Регент для скрининга непредвиденных антител групп крови ферментными и неферментными методами.

Состав:

- Набор из шести флаконов, содержащий 3% или 0,8% суспензии индивидуальных донорских клеток группы O, несущих наиболее клинически значимые, а также редкие антигены.
- три флакона необработанных эритроцитов трех разных доноров. Три флакона клеток, обработанных фицином, тех же трех доноров.
- BioVue Screen содержит клетки доноров, гомозиготных по антигенам систем Rh, Kidd, Duffy и MNS.

Код для заказа:

719812	3% BioVue Screen (I - VI)	6 x 2 мл
719111	0,8% BioVue Screen (I - VI)	6 x 10 мл



Resolve® Panel A

Панель для идентификации непредвиденных антител групп крови. Предназначена для определения всех одиночных и наиболее простых множественных антиэритроцитарных антител.

Состав:

- Панель из 11 флаконов, содержащих 3% или 0,8% суспензии индивидуальных донорских эритроцитов группы О в растворителе низкой ионной силы.
- Обязательное наличие следующих антигенов: D, C, E, c, e, K, k, Kp^a, Fy^a, Fy^b, Jk^a, Jk^b, M, N, S, s, Le^a, Le^b и P₁.
- Антигенный состав каждого донора приведен в сопутствующем профиле антигенов ANTIGRAM®.

Код для заказа:

6901865	3% Resolve Panel A	11 x 3 мл
719502	0,8% Resolve Panel A	11 x 3 мл



Resolve® Panel B

Набор стандартных эритроцитов для дополнения основных панелей, используемых для рутинной идентификации. Панель включает большее количество Rh гомозиготных клеток для идентификации дополнительных антител.

Состав:

- Панель из 11 флаконов, содержащих 3% или 0,8% суспензии индивидуальных донорских эритроцитов группы О в растворителе низкой ионной силы.
- Обязательное наличие следующих антигенов: D, C, E, c, e, K, k, Kp^a, Fy^a, Fy^b, Jk^a, Jk^b, M, N, S, s, Le^a, Le^b и P₁.
- Антигенный состав каждого донора приведен в сопутствующем профиле антигенов ANTIGRAM®.

Код для заказа:

6901866	3% Resolve Panel B	11 x 3 мл
719522	0,8% Resolve Panel B	11 x 3 мл



Resolve® Panel C

Дополнительная расширенная 22-клеточная панель для идентификации непредвиденных антител групп крови.

Состав:

- Панель из 22 флаконов, содержащих 3% или 0,8% суспензии 11 индивидуальных донорских эритроцитов группы О.
- Панель включает 11 флаконов необработанных эритроцитов и 11 флаконов тех же клеток, обработанных фицином.
- Обязательное наличие следующих антигенов: D, C, E, c, e, K, k, Kp^a, Fy^a, Fy^b, Jk^a, Jk^b, M, N, S, s, Le^a, Le^b и P₁.
- Антигенный состав каждого донора приведен в сопутствующем профиле антигенов ANTIGRAM®.

Код для заказа:

6901867	3% Resolve Panel C	22 x 3 мл
719402	0,8% Resolve Panel C	22 x 3 мл

Контрольный материал



ORTHO® Confidence™

Набор для контроля качества серологических реагентов, а также автоматических или ручных систем, в которых используется методика колоночной агглютинации.

Состав:

Набор изготовлен на основе донорских эритроцитов. Концентрация эритроцитов в каждом образце составляет 15±2%. Клетки суспендированы в растворе консерванта для замедления гемолиза и бактериальной контаминации.

- 1 - группа A₁B D+C+E+c+e+ (R₁R₂)
- 2 - группа O D+C+E-c-e+ (R₁R₁) K+, анти-A, анти-B, анти-c
- 3 - группа A D+C-E+c+e- (R₂R₂) Fy(a-), анти-B, анти-Fy^a
- 4 - группа B D-C-E-c+e+ (rr) K-, анти-A, анти-D

Код для заказа:

6842785	4 x 6,5 мл
----------------	------------



ORTHO® Coombs Control

Контрольный реагент для подтверждения отрицательных антиглобулиновых тестов.

Состав:

Контроль содержит 10 мл 3% суспензии эритроцитов группы О, сенсibilизированных IgG, в фосфатно-цитратном буферном разбавителе с добавками для поддержания реакционной способности, замедления гемолиза и предотвращения бактериальной контаминации.

Код для заказа:

6901868

1 x 10 мл

Антисывороточные реагенты

Код	Описание		Упаковка
721107	Анти-Cellano	смесь поликлональных IgG анти-k̄ человека	1 x 3 мл
715120	Лектин анти-A1	фитогемоагглютинин растения Dolichos biflorus	1 x 3 мл
715121	Анти-Fy ^a	смесь поликлональных IgG человека	1 x 3 мл
715122	Анти-Fy ^b	смесь поликлональных IgG человека	1 x 3 мл
714103	Анти-S	смесь поликлональных IgG человека	1 x 3 мл
714104	Анти-S̄	смесь поликлональных IgG человека	1 x 3 мл
715123	Анти-M	смесь поликлональных IgM кролика	1 x 5 мл
715124	Анти-N	смесь поликлональных IgM кролика	1 x 5 мл
715125	Анти-P ₁	поликлональный IgM козий	1 x 3 мл
713121	Анти-C ^w	смесь поликлональных IgM человека	1 x 3 мл
716123	Анти-IgG	анти-IgG кролика	3 x 10 мл
6904493	Анти-D	моноклональные человеческие антитела класса IgM/IgG (клеточные линии LDM3/ESD1)	1 x 5 мл
712105	Анти-D	смесь поликлональных IgG человека	1 x 10 мл
715460	ORTHO® Rh-hr Control	контроль для реагента Анти-D	1 x 10 мл
719819	ProControl S1 и S2	положительный и отрицательный контроль непрямого антиглобулинового теста	2 x 5 мл

Антисыворотки BioClone®

Код	Описание		Упаковка
711228	Анти-А	смесь моноклональных IgM мыши (клоны МН04, 3D3)	3 x 10 мл
711328	Анти-В	смесь моноклональных IgM мыши (клоны NB1.19, NB10.5A5, NB10.3B4)	3 x 10 мл
711528	Анти-А,В	смесь моноклональных IgM мыши (клоны МН04, 3D3, NB1.19, NB10.5A5)	3 x 10 мл
712370	Анти-D	смесь моноклональный IgM человека (клон MAD-2) поликлональный IgG человека	3 x 10 мл
713118	Анти-С	моноклональный IgM человека (клон MS24)	1 x 5 мл
713119	Анти-Е	моноклональный IgM человека (клон C2)	1 x 5 мл
713120	Анти-с̄	моноклональный IgM человека (клон MS24)	1 x 5 мл
713125	Анти-е	смесь моноклональных IgM (MS16, MS21, MS63)	1 x 5 мл
713129	Анти-К	моноклональный IgM человека (клон MS56)	1 x 5 мл
6901859	Анти-Le ^a	моноклональный IgM мыши (клон 17A5G8)	1 x 5 мл
6901860	Анти-Le ^b	моноклональный IgM мыши (клон 4C4C7)	1 x 5 мл
721105	Анти-Jk ^a	моноклональный IgM человека (клон MS15)	1 x 3 мл
721106	Анти-Jk ^b	моноклональный IgM человека (клон MS8)	1 x 3 мл
716121	Анти-IgG, -C3d	смесь анти-IgG кролика и мышинных моноклональных анти-с3b (клон F7G3) и анти-с3d (C4C7) (прозрачный)	3 x 10 мл
716122	Анти-IgG, -C3d	смесь анти-IgG кролика и мышинных моноклональных анти-с3b (клон F7G3) и анти-с3d (C4C7) (зеленый)	3 x 10 мл
716114	Анти-C3d	моноклональный анти-с3d мыши (клон C4C7)	1 x 3 мл
716115	Анти-C3b+C3d	смесь моноклональных анти-с3b (клон F7G3) и анти-с3d мыши (клон C4C7) в кроличьей сыворотке	1 x 3 мл
6902041	Анти-D	смесь моноклональный IgM человека (клон D7B8) поликлональный IgG человека (H1121G6 и LORIFA)	3 x 10 мл
6902042	Rh reagent control	контрольный реагент для Анти-D BioClone®	1 x 10 мл

Антисыворотки MolterClone™

Код	Описание		Упаковка
6902044	Анти-А	моноклональный IgM мыши (клон BIRMA-1)	3 x 10 мл
6902045	Анти-В	моноклональный IgM мыши (клон LB2)	3 x 10 мл
6902046	Анти-А,В	смесь моноклональных IgM мыши (клоны ES4, ES15)	3 x 10 мл
6902047	Анти-D	смесь моноклональный IgM человека (клон TH-28) моноклональный IgG человека (клон MS-26)	3 x 10 мл

Усилители реакции

Код	Описание		Упаковка
6902040	Ortho Bliss	буферный раствор низкой ионной силы	3 x 10 мл
707116			4 x 50 мл
718820	0,8% Red Cell Diluent	раствор низкой ионной силы для приготовления суспензий эритроцитов с концентрацией 0,8%	3 x 10 мл
718825			1 x 50 мл
718280	Bovine Albumin 22%	раствор бычьего сывороточного альбумина с концентрацией белка 22% и pH 7,2	15 x 10 мл
718109			3 x 10 мл
718110	Polimerized Bovine Albumin	полимеризованный бычий альбумин (буферный раствор pH 7,2)	3 x 10 мл
718780	Antibody Enhancement Solution	фосфатно-буферный водный раствор низкой ионной силы для активации антител	15 x 10 мл
718782			3 x 10 мл
955002	Bromelin	раствор бромелина для обработки эритроцитов	100 тестов

Расходные материалы



Код	Описание		Упаковка
4056	BioVue™ Liner – прокалыватель кассет для определения группы крови ABO и резус-фактора		20 штук
791200NN	Наконечники для электронной пипетки BioVue (упакованные)		960 штук
780043NN	Наконечники для электронной пипетки BioVue (неупакованные)		1000 штук
655101	Плашки Greiner на 96 лунок для приготовления 3% суспензии		1 штука
96.8564.9.01	Плашки TREFF на 96 лунок для приготовления 0,8% суспензии		1 штука

Дополнительные принадлежности

Принадлежности для OrthoScan™

Код	Описание	Упаковка
300.0040	OrthoScan рамки	2
300.0041	OrthoScan держатель рамки	1
400.0038	Черная лента	5
400.0039	Этикетки для принтера	6 рулонов
500.0046	Головка для принтера	1

Программное обеспечение Resolvigen™

Код	Описание	Упаковка
resolv-03	Программное обеспечение Resolvigen 3 для автоматической идентификации непредвиденных антител	1
resolv-02	Лицензия Resolvigen 3	1 годовая лицензия